

水活性分析測定儀

EZ-200

高解析觸控螢幕

以AOAC認可分析原理

【電阻阻抗原理測定】


縮短水活性值檢測時間

(比過往他牌機種縮短30%)



同時顯示水活性/溫度
曲線走勢圖

水活性儀可保存100件資料
並可使用USB輸出 (ExI檔輸出)

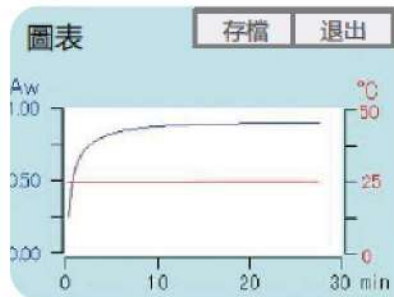

履歷

退出

Date	Time	Aw	°C
16/08/17	09:15	0.75	25.2
16/08/17	10:23	0.74	25.3
16/08/17	11:08	0.76	25.2
16/08/17	14:35	0.75	25.1
16/08/17	15:28	0.73	25.2

刪除 存檔

Aw校正 16/09/02 10:24

退出

經過時間 0.75

請更換感測器

START

首次 2.000 2.000 2.007 3.210

目前 2.000 2.000 2.007 3.210

首次合格 C-1 C-2 C-3 C-4

0.328 0.529 0.753 0.930

客戶可自行更換或校正感測器
(不需搭配其他工具)

設置水活性感測器保護過濾片 (附加配備)
可抑制因酸性物質所導致的感測器劣化

不易受到酒精影響，可透過感測器
正確無誤地測定出水活性Aw值



水活性校正標準品可重複使用

內附快速降低水活性值乾燥劑
縮短測量時間

日本50年歷史 知名廠牌製作

售後服務完善 可安心選購



型號	EZ-200
感應器	電阻阻抗式(AOAC認可分析原理)
螢幕顯示	LCD觸控式大螢幕
測量範圍	0.10~0.98Aw
測量精度	±0.01 Aw(25°C±0.3°C)
測量時間	平均 10 分鐘 / sample*2
測量模式	基本型/濾片保護模式
測量顯示	數值與分析圖同步顯示
報告儲存	內建100筆資料儲存,亦可USB存出成.Exl檔
校正點數	4 points (0.33、0.53、0.75、0.93 Aw) / 25°C
校正保養	標準品可重複/免保養無耗材
電壓範圍	Input:100-240V/50-60Hz
輸出電壓	DC24V/0.65A
機器尺寸	165(W)×130(H)×270(D)mm
機器重量	4.3Kg



標準配件:電源轉接器、樣本容器(5個)、校準用標準鹽(4種)、潤滑膏、乾燥劑、吸管、量匙
選購配件:樣品盤(10)、感知器保護過濾網(10)、量測感應器

