

水分活性測定器

EZ-200




水分活性測定器

EZ-200

特 色

- 縮短檢測時間（比過往他牌機種縮短30%）
- 不易受到酒精影響，可透過感測器正確無誤地測定出Aw
- 客戶可自行更換或校正感測器（不需搭配其他工具）
- 設置感測器保護過濾片（附加配備）可抑制因酸性物質所導致的感測器劣化
- 機器本體可保存100件資料，並可使用USB（CSV輸出）
- 日本國內製造，售後服務完善，可安心選用

觸控式螢幕主要顯示資訊

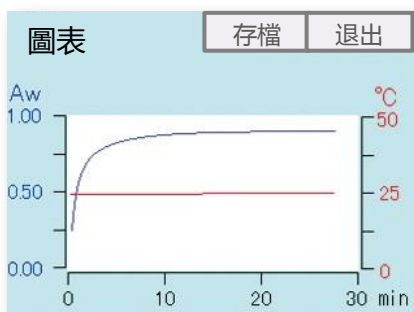

Date	Time	Aw	°C
16/08/17	09:15	0.75	25.2
16/08/17	10:23	0.74	25.3
16/08/17	11:08	0.76	25.2
16/08/17	14:35	0.75	25.1
16/08/17	15:28	0.73	25.2

Aw校正 16/09/02 10:24				
經過時間	0.75	START	25.3°C	
首次	2.300	2.300	2.307	3.210
目前	2.300	2.300	2.307	3.210
首次合格	C-1	C-2	C-3	C-4
	0.328	0.529	0.753	0.930

製品規格

品名	水分活性測定器
型號	EZ-200
感測器	電氣抵抗式
測定範圍	0.10 ~ 0.98 Aw 小數點後第 2 位數的顯示方式可選擇將第 3 位數「四捨五入」、「捨去」、「進位」
測定精度	± 0.01 Aw (25±0.3°C)
測定時間	平均10分鐘 / 1檢體
校正	4 階段 (0.33、0.53、0.75、0.93 Aw) 25°C
使用環境	15°C ~ 35°C (非結露環境)
電源	100 ~ 240V 47 ~ 63Hz
尺寸	165 (W) × 130 (H) × 270 (D) mm
本機重量	4.3 kg
基本配備	充電電源 / 試料容器x5個 / 校正用恆溫鹽4種 / 矽膠 / 潤滑脂
附加配備	試料容器x10個 / 恆溫鹽/感測器保護過濾片 x10片 / 更換用隔片 / 更換用感測器基板



製品規格將可能於未事先通知之情況下進行調整，祈請諒解。

フロイント産業株式会社

<http://www.freund.co.jp>

本社・東京営業課：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目25-13 フロイントビル
大阪営業課：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町12-41
名古屋営業所：〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141ビル

TEL 03-6890-0826 FAX 03-6890-0875
TEL 06-6338-6750 FAX 06-6338-3269
TEL 052-589-0355 FAX 052-589-0356